



EMPIRE TECH

# הוראות שימוש, תחזוקה וניקוי EMPIRE LED EYE DEVICE



מצב הפעלה  
חכם



חימום יוני



שני מצבי  
עבודה



טעינה  
ניידת



מיקרו ויברציה  
בתדירות גבוהה



## הוראות שימוש

מצב הרטט יופעל באופן אוטומטי ברגע שהאצבע תונח על החיישן. עסו בעדינות את החלק העליון והתחתון של העין לכיוון הרקה.

1 דקה

השתמשו באצבע כדי לקחת כמות מתאימה של קרם/סרום עיניים ומרחו אותו בעדינות מזווית העיניים לכיוון הרקה.

5 שניות




בהתאם לנקודות בתמונה לחצו בעדינות והישארו בכל נקודה למשך 10 שניות וחזרו על פעולה זו בין 2-3 פעמים.

1 דקה

החליקו את המכשיר בתנועה מעגלית בהתאם לתמונה וחזרו על פעולה זו בין 3-5 פעמים.

1 דקה

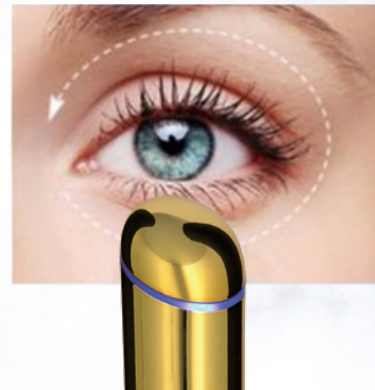

## הוראות תחזוקה וניקוי

לחצו על כפתור הכיבוי

1

נקו את המכשיר באמצעות מגבון לח בלבד (לא מחוספס) **אין להשתמש באלכוהול בריכוז גבוה או חומצה אשר עלולים לפגוע באיכות המכשיר.**

2

כסו את ראש המכשיר בעזרת הכיסוי המצורף.

3

הניחו את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב, הרחק משמש.

4

חברת EMPIRE TECH מעניקה אחריות מלאה ל-3 שנים (האחריות אינה תקפה במקרים של שימוש לא נכון במכשיר או שבר) חשוב לציין כי התקלפות הודות לשימוש לא נכון בעת ניקוי אינה פוגעת בפעילות תקינה של המכשיר.

5

